



Sillón respaldo bajo. Ideal para comedores, salas de terapia, etc. con un diseño moderno y muy resistente.

Fabricada en un bastidor en tubo metálico pintado en gris y pata en madera de haya maciza de haya de primera calidad, con asiento desenfundable laminado en contrachapado, brazos que ofrecen un fuerte apoyo al usuario y tapicería en material vinílico con alta resistencia al desgaste y al fuego.

Descripción

Silla geriátrica fabricada en un bastidor en tubo metálico pintado en gris y pata en madera de haya maciza de haya de primera calidad, con asiento desenfundable laminado en contrachapado, brazos que ofrecen un fuerte apoyo al usuario y tapicería en material vinílico con alta resistencia al desgaste y al fuego.

Asiento laminado en contrachapado con gomaespuma de poliuretano.

Tapicería en material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso, retardancia al fuego (M2), con tratamiento al ataque por microorganismos y fácil de limpiar.

Barnizado de fondos y acabados en poliuretano.

Mantenimiento

La **tapicería** debe ser limpiada periódicamente para mantener su apariencia y prevenir acumulación de suciedad y contaminantes.

Quite el polvo con un trapo humedecido en agua o limpie suavemente con una esponja mojada en agua jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas. Seque a continuación con un trapo seco.

En caso de manchas tratar inmediatamente con agua jabonosa o frotar con un paño impregnado en alcohol o White-Spirit.

Para que el agua no penetre en las costuras evite utilizar gran cantidad para luego enjuagar.

Antes de emplear un producto de limpieza se recomienda hacer una prueba en una zona escondida para comprobar que su uso no deteriora el artículo.

No utilice sustancias abrasivas, disolventes fuertes ni compuestos con silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjillas metálicas, ya que pueden afectar las propiedades del material. No utilice lacas o tintas.

Para la **madera**, pase un trapo limpio por el mueble para quitar el polvo y la suciedad de la superficie. Como regla general no use mucha agua para evitar que la madera se deforme o se agriete.

Galería



Mod 901



Mod 905-R



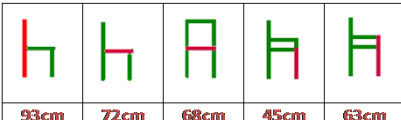
Mod 907-2



Mod 916

Especificaciones

Bastidor	Bastidor realizado en tubo de acero rectangular (diversas medidas) soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíficas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas al horno. Las uniones entre patas-brazo y bastidor se realizan mediante tornillos M-6 zincados. Deslizantes plásticos en los extremos de las patas.
Asiento	Asiento desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 m/m, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Como opción se puede suministrar en doble densidad.
Respaldo	Fabricado en contrachapado de 10,8 mm con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano inyectada D55 con formas ergonómicas.
Brazos	Pata-brazo en contrachapado de haya de 80x22 mm, barnizado con poliuretano..
Tapicería	Material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso (abrasión), retardancia al fuego (M2), durabilidad del color a los rayos solares (UV), con tratamiento al ataque por microorganismos (hongos y bacterias), excelente facilidad de limpieza y buenas resistencias físicas: resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, resistencia a la sangre, resistencia a los aceites de girasol, resistentes a las manchas. Protección antimicrobial. Protección antibacterial. Protección antimicótica. Acabado antiestático. Amplia 'carta de colores.
Barnizado	Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.
Acabados	Color madera según muestrario. Las tapicerías se realizan en colores firmes y durables que no decoloran ni se transfieren a otros materiales. Disponemos de una amplia carta de colores..
Espumas	Espumación suave de alta densidad, para cualquier tipo de peso, proporcionando un descanso suave, flexible y con una mayor durabilidad.
Opciones	Reposapiés integrado: en contrachapado de 10,8 mm y recubierto de espuma de poliuretano D30B. Traslado: provisto de 4 ruedas giratorias, las posteriores con freno total. Reposapiés metálico abatible y asa de transporte.
Otros modelos	900. Respaldo bajo: hasta la altura de los hombros. 901. Respaldo alto: permite apoyar la cabeza. 905R. Sistema reclinable: respaldo con sistema metálico reclinable manual (4 posiciones). 907-2. Respaldo partido: respaldo bajo, con suplemento convertible en alto y abatible. 910. Asiento móvil con inclinación (3 posiciones).

Dimensiones	
	93cm 72cm 68cm 45cm 63cm

Normativa	La tapicería es de material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994
------------------	--